



ORTHOPAEDICS™

Mais conforto, mais sorrisos, mais dias felizes



Mitchell Ponseti.

Catálogo de Produtos

ATENDIMENTO NO BRASIL



Fale conosco

Nossa equipe está pronta para atender médicos, clínicas e famílias em todas as etapas da jornada do pé torto.



TELEFONE / WHATSAPP

+55 11 99752-4845



E-MAIL

asilva@orthopediatrics.com



INSTAGRAM

@followmed.ortopedia

Mais conforto, mais sorrisos, mais dias felizes

MD ORTOPEDIA

CONTATO NO BRASIL

PRODUTOS

Mitchell Ponseti® Padrão AFO	9
Mitchell Ponseti® AFO PFS.....	10
Mitchell Ponseti® AFO Toe Stilt	11
Mitchell Ponseti® AFO PFS/Toe Stilt	12
Conjunto de amostras de cores	12
AFO de cores personalizadas.....	13
Barra de Abdução Ponseti®	14
Kit de Hardware da Barra Ponseti®	14
Cobertura da Barra Ponseti®	15
Selas de Pressão.....	15
Dimensionamento do Conjunto de Revestimentos	15

PRODUTOS DE TREINAMENTO

Modelo de pé torto Ponseti®	16	Aplicação de
gesso Pernas e suportes de borracha	16	Modelo de
tenotomia	16	
Modelo de Gesso em Cinco Estágios	16	
Modelo de Prática de Tenotomia	17	
Modelo de Tálus Vertical	17	
Kit de Treinamento Mitchell Ponseti®	18	

LIVROS

Crônicas do pé torto	20
Pé torto: a busca por uma vida melhor ..	20
O Guia dos Pais para Pé Torto.....	21
Meus Sapatos Inteligentes de Noite-Noite	21
Hip, Hop Hooray para Brooklyn!	21

INFORMAÇÕES GERAIS

Instruções para pedidos	22
Medidas para dimensionamento	22
Perguntas Frequentes	23

Fomos pioneiros

uma cinta de pé torto que se tornou

O ACEITO

PADRÃO DE CUIDADO.

Através da inovação contínua,
continuamos a aperfeiçoá-lo.

Há mais de 16 anos, somos

PARCERIA COM

MÉDICOS E PAIS

para criar dispositivos de ponta que tornam a jornada do pé
torto mais fácil para todos.

Nosso compromisso com

CONFORTO, CONFIANÇA E PAZ DE ESPÍRITO DOS PAIS

orienta crianças e famílias com pé torto ao longo do caminho
para resultados de mudança de vida.

Como designer e fabricante de produtos, a MD Orthopaedics não fornece tratamento médico, aconselhamento ou informação. As informações sobre os riscos e benefícios do tratamento médico, incluindo o tratamento que envolve o uso de produtos da MD Orthopaedics e as alternativas disponíveis, são fornecidas exclusivamente por médicos ou outros profissionais de saúde. Se

você tiver dúvidas sobre o tratamento de seu filho, é importante discutir essas questões com o profissional de saúde apropriado.

A MD Orthopaedics não garante e não pode garantir certos resultados do uso de seus produtos.



Mais conforto

Sobre nós

Guiando jornadas, transformando vidas e moldando o futuro com conforto e compaixão – quando a MD Orthopaedics começou nosso trabalho para melhorar o tratamento não cirúrgico do pé torto em 2004, esses objetivos são o que nos levou adiante.

Sabíamos que era possível melhor e que as famílias não mereciam nada menos. Através do trabalho colaborativo com o pioneiro da indústria, Dr. Ponseti, nasceu uma solução melhor.

17 anos depois, nosso compromisso com produtos de qualidade e educação não vacilou. Continuamos a liderar o caminho para resultados que mudam a vida das crianças e das famílias que as acompanham.

Atendimento ao cliente é o nosso negócio

Na MD Orthopaedics, oferecemos uma abordagem centrada na família para o atendimento ao cliente. Nossa equipe trabalhou com mais de meio milhão de mães e pais para obter um tratamento bem-sucedido para seus filhos.

Estamos prontos para ajudar em todas as etapas da jornada de cura. Nossa equipe de suporte ao cliente é seu parceiro durante a jornada do pé torto da sua família.



+55 11 99752-4845
asilva@orthopediatrics.com





Bryce Alan Flurie/CURE Internacional

O que é o pé torto?

R: Pé torto (também chamado de talipes equinovarus) é um termo geral usado para descrever uma série de posições incomuns do pé. Cada uma das seguintes características pode estar presente e cada uma pode variar de leve a grave:

- O pé (especialmente o calcanhar) geralmente é menor que o normal.
- O pé pode apontar para baixo.
- A frente do pé pode ser girada em direção ao outro pé.
- O pé pode virar para dentro (conhecido como inversão) e, em casos extremos, a sola do pé pode apontar para cima.

A maioria dos tipos de pé torto está presente no nascimento (pé torto congênito). O pé torto pode ocorrer em um pé ou em ambos os pés. Em quase metade dos bebês afetados, ambos os pés estão envolvidos. Embora o pé torto seja indolor em bebês, o tratamento deve começar imediatamente, pois o atraso na terapia pode causar problemas significativos à medida que a criança cresce. Com o tratamento precoce, a maioria das crianças nascidas com pé torto é capaz de levar uma vida normal.



Bryce Alan Flurie/CURE Internacional

O que é o Método Ponseti?



R: O Método Ponseti é um processo de tratamento não cirúrgico que foi desenvolvido pelo Dr. Ignacio Ponseti. O método utiliza uma série de gessos que gradualmente movem o pé para a posição correta. A cada semana o gesso é removido e substituído por um novo gesso.

+55 11 99752-4845
asilva@orthopediatrics.com



Pioneirismo com o Dr. Ignacio Ponseti

Dr. Ignacio Ponseti, ortopedista da Espanha, criou o método não cirúrgico de correção do pé torto. Seus anos de experiência o convenceram de que os métodos cirúrgicos de reparo do pé torto na verdade prejudicavam as crianças.

Ao longo dos anos, enquanto trabalhava na Universidade de Iowa, sua pesquisa se mostrou promissora. O que hoje é conhecido como Método Ponseti é aplicado em várias fases do tratamento (consulte “Jornada do Pé Torto” na página 7). Este procedimento é agora considerado o método de referência para o tratamento de pacientes com pé torto em todo o mundo.

Hoje, o Método Ponseti é bem-sucedido em 95% dos casos de pé torto em todo o mundo e, desde a virada do século, a cirurgia para o pé torto diminuiu em até 90%.

John Mitchell, inventor e presidente da MD Orthopaedics, começou a trabalhar a pedido urgente de Ponseti de uma órtese “boot and bar” para se casar com o famoso procedimento não cirúrgico de Ponseti chamado Método Ponseti.




Dr. Ponseti e John Mitchell com o Mitchell Ponseti® AFO

“Os sapatos disponíveis eram muito inadequados, eram feitos com solas duras e mal moldadas ao pé. E após o tratamento você precisa ter sapatos confortáveis para os bebês dormirem à noite e usarem no meio do dia durante as horas de cochilo. E eu estava realmente, de novo, muito desesperada tentando encontrar um sapato que servisse com conforto aos bebês. E aqui, conversei com o John... Claro que ele conhecia plásticos e tecnologias modernas que eu não conhecia. E ele sozinho desenvolveu este excelente sapato que eu precisava particularmente para pés difíceis que chamamos de pés complexos e foi uma dádiva de Deus realmente porque resolveu o problema do pós-tratamento da deformidade.”

– Dr. Ignacio Ponseti

Jornada do pé torto

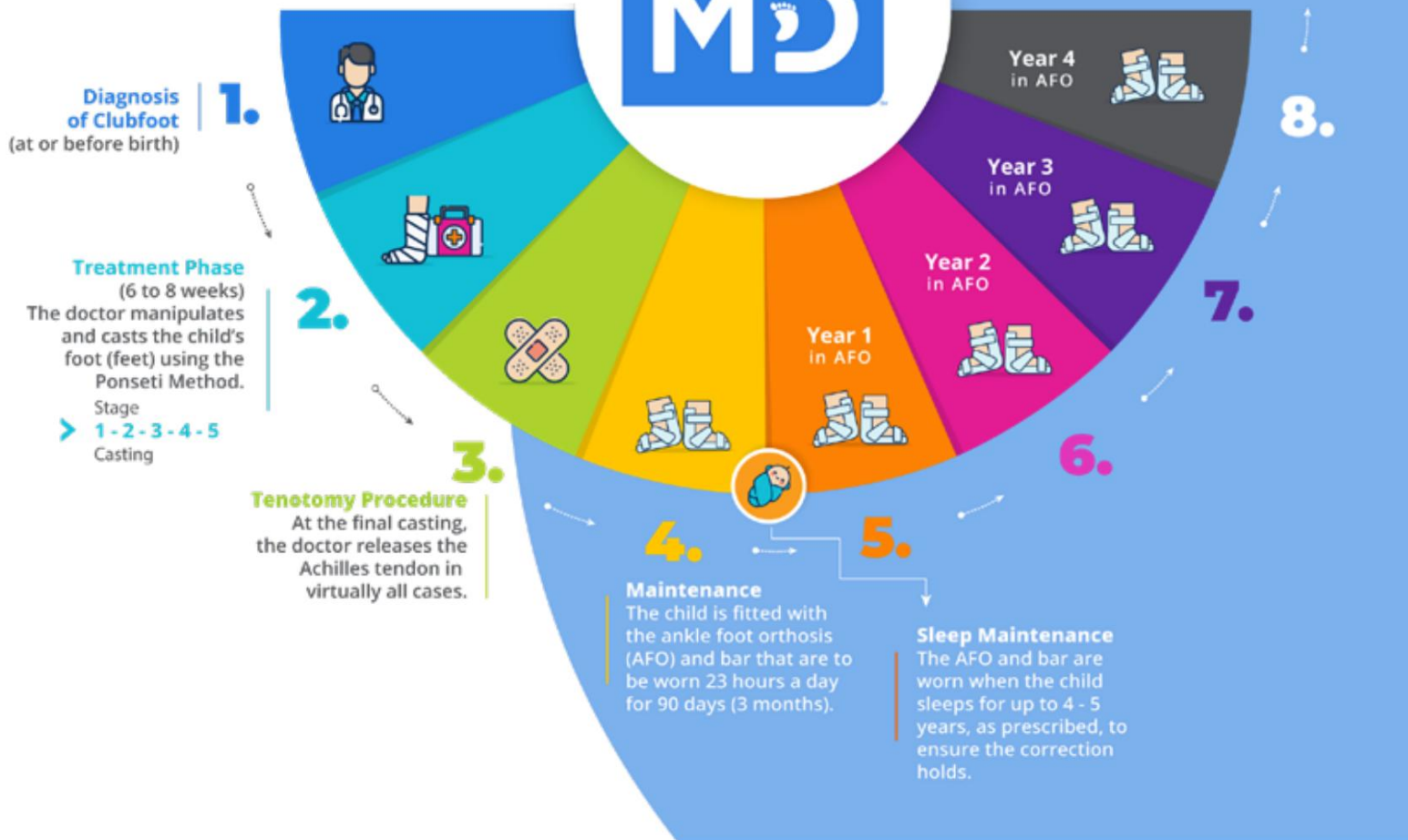


O "Clubfoot Journeytm" é um processo de vários anos altamente desenvolvido que leva os pacientes a uma correção bem-sucedida de sua condição de pé torto.

Este infográfico indica que tais informações médicas são meramente informações – não conselhos. Se os usuários precisarem de aconselhamento médico, eles devem consultar um médico ou outro profissional médico apropriado. Nenhuma garantia é dada em relação às informações médicas fornecidas e nenhuma responsabilidade será acumulada para a MD Orthopedics no caso de o usuário sofrer perda como resultado da confiança nas informações.

+55 11 99752-4845
asilva@orthopediatrics.com



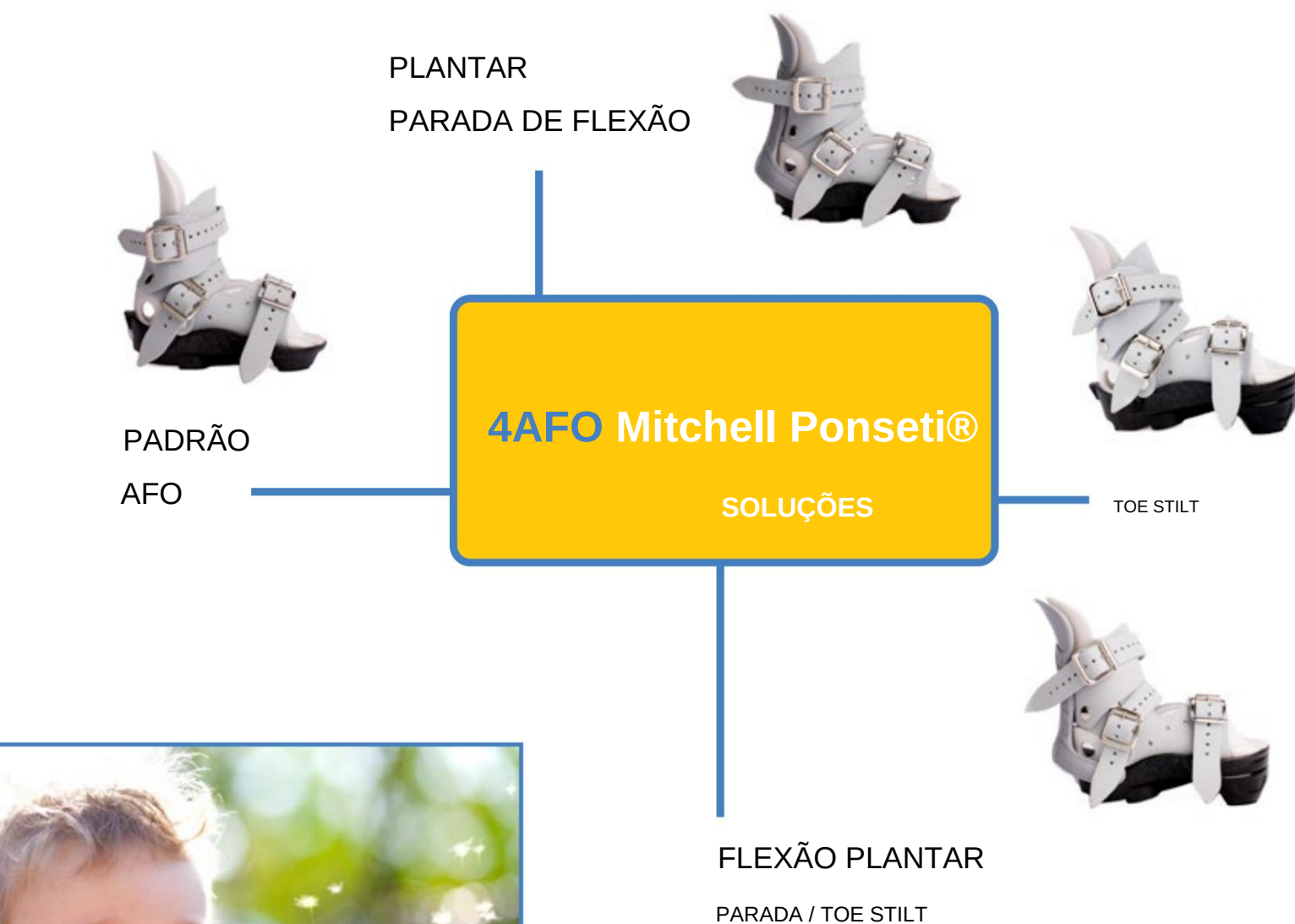

O FUTURO DO TRATAMENTO DO PÉ TORTO

*A opinião de codificação expressa é baseada em informações submetidas para revisão e na experiência clínica dos membros do Comitê de Codificação da AOPA. Nem a AOPA nem seu Comitê de Codificação recomendam ou endossam produtos/dispositivos de qualquer fabricante.

Independentemente da fonte das informações de codificação, a responsabilidade final pela codificação correta dentro de todas as leis, regras, padrões e práticas estabelecidas é de responsabilidade exclusiva da instalação que envia a reclamação. AOPA e seu Comitê de Codificação não se responsabilizam e não serão responsáveis por quaisquer ações relacionadas a essas informações de codificação.

SOLUÇÕES
MITCHELL PONSETI® AFO

AFO

A: Tornozelo

F: Pé

O: Órtese

MITCHELL PONSETI® AFO PADRÃO



Ortótise de tornozelo-pé padrão para uso com o Método Ponseti de correção do pé torto. Nosso sistema patenteado apresenta um forro macio para conforto e conformidade e tiras de couro sintético macio. A localização do calcanhar pode ser facilmente vista através de dois orifícios na parte de trás do AFO e os acessórios do calçado à Barra de Abdução Ponseti® (vendida separadamente), de acordo com o protocolo de órtese Ponseti padrão.

Disponível nos tamanhos preemie a 12.

Consulte valores com nossa equipe

*Código recomendado - L1930

Mitchell Ponseti®


Padrão AFO • sistema

patenteado de calçado de alta qualidade baseado na Método Ponseti®

- alças e corpo de couro sintético macio
- maior visibilidade do calcanhar
- fácil travamento e liberação do calçado, que se prende ao Barra de Abdução Ponseti®

Forro de
conforto patenteado

Durável, sem
tiras de rasgo e
fivelas seguras e
rebitadas

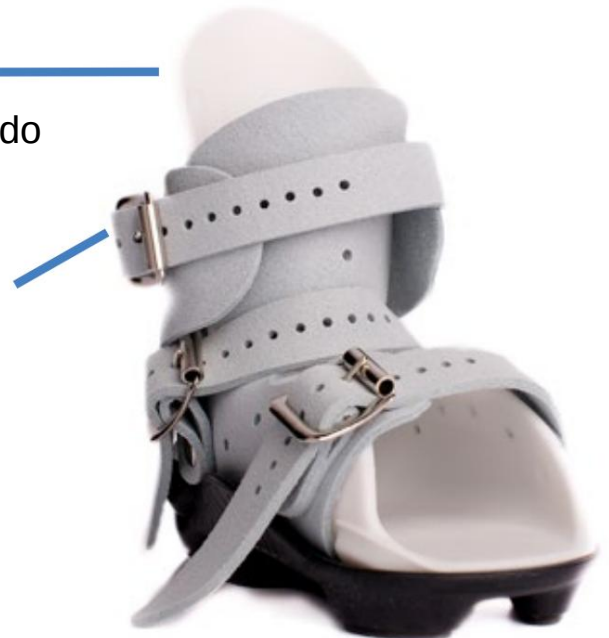

+55 11 99752-4845

asilva@orthopediatrics.com



Mitchell Ponseti

MITCHELL PONSETI® AFO

PARADA DE FLEXÃO PLANTAR

PFS

P: Plantar

F: Flexão

S: Parada

A parada de flexão plantar articulada limita a flexão plantar com dorsiflexão rígida para manter a posição prescrita do pé. Recomendado para o pé torto complexo. Este dispositivo também é bom para crianças com pés hiperflexíveis, pois garante que o pé seja sempre mantido em posição neutra ou dorsiflexionada.

Disponível nos tamanhos 00 a 12.

Consulte valores com nossa equipe

*Código recomendado - L1971



Mitchell Ponseti® AFO

PFS

- desenvolvido para crianças com pés hiperflexíveis
- inclui todos os recursos básicos do padrão Mitchell Ponseti® AFO
- As características especiais incluem:**
- parada de flexão plantar para limitação movimento
- dorsiflexão rígida para segurar o pé na posição prescrita

Parada de Flexão Plantar



Anexado à parte de trás do AFO



SOLUÇÕES

MITCHELL PONSETI® AFO

TS

T: Dedo do pé

S: Stilt

MITCHELL PONSETI® AFO

TOE STILT



O Toe Stilt AFO foi projetado especificamente por recomendação do Dr. Ponseti para manter a dor siflexão clinicamente desejável, alongando o tendão de Aquiles e ajudando a manter o pé flexível. Isto é conseguido pela colocação de uma cunha embutida presa à frente do AFO que mantém ambos os pés em uma posição dorsiflexionada de 10 graus quando em pé. O paciente deve ser capaz de ficar de pé de forma independente para que o Toe Stilt AFO tenha algum efeito quando usado sem a barra Ponseti® Abduction.

Disponível nos tamanhos 2 a 11.

[Consulte valores com nossa equipe](#)

*Códigos recomendados - L1930 , L3380

Mitchell Ponseti® AFO TS

- inclui todos os recursos básicos do padrão Mitchell Ponseti® AFO

As características especiais incluem:

- projetado para promover a dorsiflexão
- cunha permanente de 10 graus presa à frente do AFO



10°
cunha



+55 11 99752-4845

asilva@orthopediatrics.com



Mitchell Ponseti

MITCHELL PONSETI® AFO

PARADA DE FLEXÃO PLANTAR / TOE STILT

O Plantar Flexion Stop/Toe Stilt é um AFO de dupla finalidade que suporta o Método Ponseti de tratamento do pé torto. O AFO é usado preso à Barra de Abdução Ponseti® de acordo

com o protocolo de órtese Ponseti padrão. O Plantar Flex ion Stop (PFS) foi projetado para limitar estruturalmente qualquer flexão plantar e funciona particularmente bem em casos de pé torto com hipermóvel ou deformidade atípica/complexa corrigida. O PFS é montado no sapato padrão durante o processo de montagem, mas é projetado para ser ajustado conforme necessário por ortopedistas para atender às necessidades dinâmicas de cada criança com pé torto. O Toe Stilt estimula a panturrilha inferior, o tendão de Aquiles e o alongamento da fáscia plantar na criança que pode ficar de pé de forma independente sem a barra de abdução Ponseti®. O Toe Stilt mantém ambos pés a 10 graus de dorsiflexão quando em pé.

Consulte valores com nossa equipe

*Códigos recomendados - L1971, L3380



PFS / TS

Parada de Flexão Plantar / Toe Stilt



CORES DO ESTOQUE AFO

Todos os tamanhos e estilos das AFOs Mitchell Ponseti® estão disponíveis em cinza.

AFOs de estilo padrão, tamanhos 0000 a 6, também estão disponíveis em rosa e azul.

CONJUNTO DE AMOSTRAS DE CORES PERSONALIZADAS

O conjunto de amostras de cores personalizadas inclui onze oval de 2" amostras para ilustrar convenientemente a cor real.

Consulte valores com nossa equipe



SOLUÇÕES

MITCHELL PONSETI® AFO



CORES PERSONALIZADAS DISPONÍVEIS!

Cores personalizadas agora estão disponíveis em pares e singles de estilo AFO padrão e AFO PFS. Os estilos padrão estão disponíveis nos tamanhos 0000 a 12, os estilos AFO PFS estão disponíveis nos tamanhos 00 a 12.



Mirtilo



Marrom
Urso



Golfinho
Cinza



Girassol
Amarelo



gafanhoto
Verde



Panda
Preto



Pavão
Azul



tangerina



Pervinca
Roxa



Framboesa



Galo
Vermelho

* Nota: As cores personalizadas estão disponíveis por um custo adicional e um prazo de entrega de duas semanas e não podem ser devolvidas.

+55 11 99752-4845
asilva@orthopediatrics.com

Mitchell Ponseti

BARRA DE ABDUÇÃO PONSETI®

Barra de abdução para gerenciar a largura e orientação prescritas do pé torto corrigido. Esta barra ajustável encaixa e retira facilmente o calçado AFO por meio do nosso sistema patenteado Quick Clip. Este sistema proporciona maior facilidade de uso, aumentando a facilidade de troca de roupas, colocando a criança em uma cadeira alta ou carrinho de compras e permite que o AFO seja aplicado sem que a barra obstrua o acesso ao pé.



[Consulte valores com nossa equipe](#)

*Código recomendado - L3150 e L2768



BARRA PONSETI® KIT DE FERRAGEM

[Consulte valores com nossa equipe](#)

PRODUTOS

BARRA E ACESSÓRIOS PONSETI®



COBERTURA DA BARRA PONSETI®

Esta capa de barra macia oferece proteção e conforto para seu filho e está disponível em tamanho pequeno (5") e grande (8"), em rosa, azul claro ou azul escuro.

Consulte valores com nossa equipe



SELA DE PRESSÃO

Esta sela de pressão macia e confortável é presa à alça central do Mitchell Ponseti® AFO para fornecer alívio adicional das áreas de pressão.

Disponível em tamanho pequeno e grande. Tamanho pequeno recomendado para uso com AFO Tamanho 0000-1; Tamanho grande recomendado para uso com tamanho 2-12.

Vendido Separadamente

Consulte valores com nossa equipe

*Código recomendado - L3649



CONJUNTO DE FORRO DE DIMENSIONAMENTO

Peça o tamanho correto do paciente usando o conveniente Conjunto de revestimento de dimensionamento, em vez de fazer medições.* Coloque o pé do paciente nos revestimentos para escolher o tamanho AFO necessário. Forros para tamanho 0000 a 6 incluídos. Circunferências adicionais podem ser necessárias para pés e pernas extra largos ou extra estreitos.

Conjunto de forro de dimensionamento **GRATUITO** apenas para uso em clínica/escritório.

*Se preferir fazer medições, consulte o diagrama na página 22.



+55 11 99752-4845
asilva@orthopediatrics.com

Mitchell Ponseti

MODELO PONSETI® DE PÉ TORTO

Modelo de ensino médico para demonstrar a correção adequada da deformidade do pé torto. Erros na manipulação do pé torto congênito podem ser facilmente demonstrados com este modelo.

[Consulte valores com nossa equipe.](#)



PERNAS DE BORRACHA PARA APLICAÇÃO DE GESSO

Esses modelos anatômicos são macios e flexíveis, com gravuras de posicionamento dos dedos para demonstrar o posicionamento adequado para manipulação.

Essas pernas também servem como modelos de ensino para a correta aplicação dos moldes de gesso em cada etapa para manter a correção obtida pela manipulação.

Disponível na esquerda e direita

[Consulte valores com nossa equipe.](#)



Estágio 1



Estágio 2

MODELO DE TENOTOMIA

Fornecer um visual da relação anatômica do tendão de Aquiles. Este modelo também é uma ajuda visual útil ao discutir o procedimento e os resultados esperados com os pais.

[Consulte valores com nossa equipe.](#)



MODELO DE GESSO EM CINCO ETAPAS

O modelo de gesso permite a visualização do gesso completo em cada uma das cinco diferentes etapas do Método Ponseti, com ênfase nos pontos de referência ósseos e na plataforma do dedo do pé.

[Consulte valores com nossa equipe.](#)



PRODUTOS

TREINAMENTO

MODELO DE PRÁTICA DE TENOTOMIA

O Método Ponseti de correção do pé torto inclui a transecção cirúrgica do tendão de Aquiles para correção da deformidade dos equinos. O “Modelo de Prática de Tenotomia” da MD Orthopaedics foi desenvolvido para médicos e provedores, treinados no Ponseti Método, para praticar os passos necessários envolvidos com o procedimento de tenotomia. O modelo é projetado para identificar com precisão pontos de referência anatômicos tanto posicionalmente quanto palpavelmente. O pé-base

o molde é representativo do pé de um bebê de seis meses. O modelo pode ser praticado tanto na posição vertical posterior ou lateral com base na preferência cirúrgica. A pele sintética e o material do tendão são projetados para proporcionar sensação adequada e feedback palpável da transecção completa.



O kit inclui:

- 1 molde de pé base
- 50 tendões sintéticos
- 10 elásticos (feixe neurovascular)
- 2 sobreposições de pele sintética

Consulte valores com nossa equipe.

NOVO MODELO DE TÁLUS VERTICAL

A compreensão das relações anatômicas da deformidade vertical do tálus, seja de etiologia congênita ou iatrogênica, é fundamental na avaliação das opções de tratamento conservador ou cirúrgico. O Vertical Talus Model foi projetado para dar a orientação anatômica adequada e disposição relacional da luxação talonavicular tipicamente rígida e irreductível que define a deformidade. O modelo é representativo de uma criança de seis meses de idade. O modelo inclui um tálus de cor cinza para orientação instrucional e a diretiva “NÃO”, do próprio Dr. Ponseti, sobre a articulação calcâneo-cuboide.

Consulte valores com nossa equipe.



+55 11 99752-4845

asilva@orthopediatrics.com



Mitchell Ponseti

KIT DE TREINAMENTO MITCHELL PONSETI®

Para os novos praticantes do Método Ponseti, pode ser difícil visualizar o aspecto interno da deformidade do pé torto, palpar os pontos finais da correção anatômica ou saber exatamente onde colocar as mãos para manipulação efetiva.

O Mitchell Ponseti® Training Kit fornece as ferramentas de treinamento visual e tátil necessárias para dar aos praticantes a confiança necessária para tratar o pé torto típico e atípico até mesmo no menor paciente.

Os modelos de borracha são feitos de materiais sintéticos que reproduzem a aparência de um pé torto infantil – e são fáceis de limpar. O modelo de osso do tálus inclui um osso do tálus de cor cinza para orientação instrucional e a diretiva “NÃO” do Dr. Ponseti sobre a articulação calcâneo-cuboide.

Todos os modelos são representativos de uma criança de seis meses de idade, salvo indicação em contrário.

Consulte valores com nossa equipe.

O Kit de Treinamento contém:

- Pernas de Borracha (Fase 1 Direita - Fase 2 Direita - Estágio Direito 3 - Atípico Direito)
(Pernas 1 e 2 com gravuras de colocação de dedos)
- Modelos de Ossos
(Pé torto direito, adulto e tálus esquerdo, criança)
- Modelo de Tenotomia
- O Kit de Modelo de Prática de Tenotomia completo
- Modelos fundidos (estágios 1, 3 e 5) (1 e 5 com gravuras de colocação de dedos)
- Tamanho 0000 AFO e Barra Extra Curta
- Uma mala com rodas de 23 x 18 x 11 polegadas com inserções de espuma de corte personalizado para proteger os modelos



PRODUTOS

TREINAMENTO

IMPACTO NO TREINAMENTO DO MÉTODO PONSETI GLOBAL

A MD Orthopaedics dedica-se a treinar a próxima geração de médicos no inovador Método Ponseti e fornece uma variedade de modelos de treinamento anatômico para melhor equipar médicos, ortopedistas, protéticos e outros profissionais do Método Ponseti em todo o mundo.

Essas ferramentas permitem aos profissionais o treinamento prático de que precisam para realizar os procedimentos de manipulação, gesso e tenotomia que o Método Ponseti recomenda.

Modelos de treinamento MDO em uso:ȳ

1. Modelo de pé torto Ponseti®
2. Pernas de Borracha para Aplicação de Gesso
3. Modelo de Tenotomia
4. Modelo de Gesso em Cinco Estágios
5. Modelo de Prática de Tenotomia
6. Modelo de Tálus Vertical



Algumas das organizações que as ajudas de treinamento da MD Orthopaedics serviram:

- Ponseti Internacional
- Cura Internacional
- Universidade de Michigan
- Iniciativa Global Pé Torto
- Navios de Misericórdia
- Universidade de Oklahoma
- Shriners Hospital Canadá
- Pés Milagrosos
- Universidade do Texas
- Hospital Infantil de Michigan, Filadélfia e Wisconsin
- Universidade da Flórida
- A Fundação Nemour

O que os médicos estão dizendo...



"Os modelos de treinamento {MD Orthopaedics} foram revolucionários, eu os carrego nas minhas malas agora em todo o mundo quando vou treinar..."

- **Dr. Norgove J. Penny, MD** Cirurgião Ortopédico, Sociedade Ortopédica Pediátrica para a África



"Os modelos são uma ótima ferramenta de ensino, sem eles não dá para ensinar..."

- **Dr. John E. Herzenberg, MD** Diretor de Ortopedia Pediátrica do Hospital Sinai, Baltimore, MD



"Absolutamente fundamental para a minha formação... Este é um excelente modelo para demonstrar a técnica do método Ponseti."

- **Dr. Stephen Mannion, MD** Consultor Cirurgião Ortopédico, CBM, NHS


+55 11 99752-4845
asilva@orthopediatrics.com

MP
Mitchell Ponseti

CLUBFOOT CHRONICLES

por Maureen Hoff

Clubfoot Chronicles é um guia de referência escrito para ajudar os pais a lidar com as realidades do diagnóstico do pé torto e da jornada de tratamento. Oferecendo conselhos específicos com base em experiências do mundo real, Clubfoot Chronicles foi escrito para orientar os pais para as respostas que procuram, dando a garantia de que precisam para ter sucesso. Escrito por um pai experiente, o livro é fácil de ler, informativo e cheio de dicas úteis e insights sinceros que qualquer pai torto pode se relacionar.

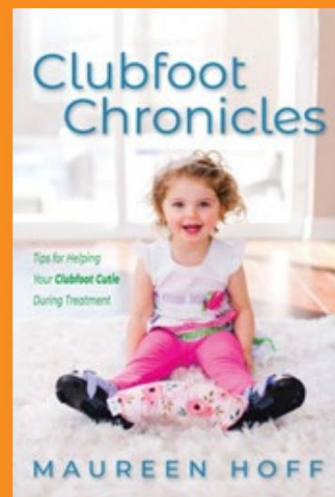


[Consulte valores](#)

CLUBFOOT: A BUSCA DE UMA VIDA MELHOR PARA MILHÕES DE CRIANÇAS

por Dr. Thomas Cook

Pé torto: a busca por uma vida melhor para milhões de crianças conta a história pouco conhecida do defeito de nascença esquelético mais comum do mundo e o desenvolvimento de um método revolucionário para eliminar a incapacidade vitalícia para as 200.000 crianças nascidas todos os anos com essa deformidade. O herói desta história é o Dr. Ignacio Ponseti (1914-2009) que, como um jovem médico, se envolveu na Guerra Civil Espanhola antes de ser forçado ao exílio na França e depois no México. Ele finalmente encontrou um lar no coração da América, onde, apesar da oposição do estabelecimento médico, ele começou uma busca ao longo da vida para remodelar o futuro das crianças de vidas de dor e deficiência para vidas de esperança e promessa. Por causa da busca do Dr. Ponseti e dos muitos profissionais de saúde, pais e outros defensores que a adotaram, uma vida normal e livre de deficiências é agora possível para centenas de milhares, senão milhões, de crianças. Este livro responde a três perguntas. Quem foi Ignacio Ponseti? Qual é o tratamento que ele desenvolveu? Quão bem-sucedida é sua busca?

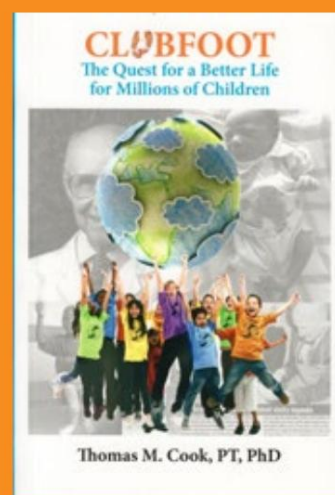

[Consulte valores](#)




Mais dias felizes!

PRODUTOS
LIVROS

THE PARENTS' GUIDE TO CLUBFOOT

por Betsy Miller

Escrito em linguagem cotidiana, o livro abrange o pé torto em bebês e crianças mais velhas, desde o diagnóstico até o tratamento de casos leves a graves. Ele fornece detalhes sobre o pé torto, suas causas, tratamento e cuidados, juntamente com uma extensa lista de recursos e auxílios para avaliação do pé torto. De acordo com os tratamentos atualmente preferidos nos EUA, ele enfatiza o Método Ponseti, que minimiza a cirurgia, e inclui perspectivas de médicos de pé torto treinados em Ponseti e pais de crianças com pé torto. No entanto, capítulos separados discutem todas as opções de cuidados pré-tratamento e pós-tratamento e um capítulo abrange a cirurgia e os cuidados pós-operatórios, se necessário.

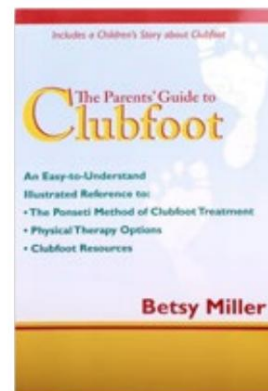


[Consulte valores](#)

MY CLEVER NIGHT-NIGHT SHOES

por Karen Moss, ilustrado por Lori Bentley

My Clever Night-Night Shoes é a história de ninar perfeita para crianças que dormem com botas e barra, incentivando as crianças Ponseti a usar seus sapatos 'night-night' especialmente projetados porque é uma parte crucial do tratamento e os resultados valem a pena.

Escrito por uma mãe com experiência em primeira mão de uma criança de força de vontade que às vezes teve que ser convencida a usar sua órtese, esta história alegre, inspiradora e reconfortante descreve os trabalhos emocionantes que diferentes sapatos têm e que usar a órtese permite que eles façam o que quiserem.

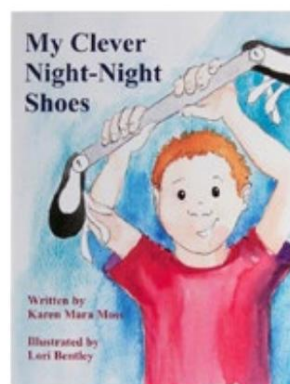


[Consulte valores](#)

HIP, HOP, HOORAY PARA BROOKLYNN!

por Jill Harold e Betsy Miller

Esta história otimista é sobre Brooklynn, um coelhinho que adora pular. Brook Lynn usa uma cinta à noite, mas ela está determinada a aprender a pular corda a tempo dos Jogos Hippy Hop. Armado com rimas de hop rope e uma atitude positiva, Brooklynn mostra que a persistência compensa e pode ser muito divertida.

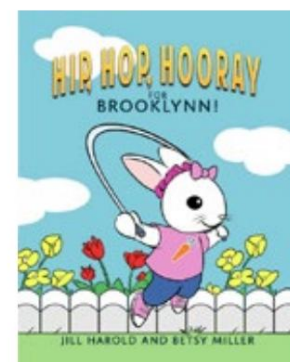

[Consulte valores](#)

+55 11 99752-4845

asilva@orthopediatrics.com



Mitchell Ponseti



FAZENDO SEU PEDIDO

Faça seu pedido pelos nossos canais no Brasil:

- WhatsApp / Telefone:
+55 11 99752-4845
- E-mail:
asilva@orthopediatrics.com
- Instagram:
@followmed.ortopedia


Informe no pedido: modelo do AFO, tamanho, cor, quantidade e os dados da clínica ou do paciente.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Pedidos, orçamentos, prazos de entrega e frete são confirmados diretamente pela nossa equipe no Brasil.
- Em caso de dúvida sobre o tamanho, envie as medidas A e B do pé (em cm), conforme o diagrama abaixo.
- O conjunto de forros de dimensionamento (uso exclusivo em clínica/consultório) pode ser solicitado pelo WhatsApp ou e-mail.
- Cores personalizadas têm custo adicional, prazo maior de produção e não podem ser devolvidas.

MEDIDAS PARA DIMENSIONAMENTO MITCHELL PONSETI® AFOS

	Left (cm)	Right (cm)
A		
B		

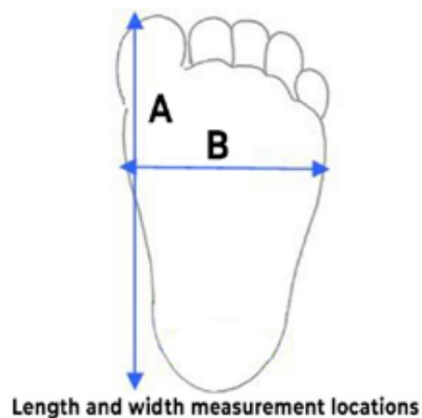

MD ORTOPEDIA

INFORMAÇÕES GERAIS

PERGUNTAS FREQUENTES

As fivelas vão para o interior do pé ou para o exterior do pé?

O AFO foi desenhado com as fivelas na parte interna do pé. Este recurso de design é para ajudar os pais na colocação e retirada das AFOs. Os especialistas da Ponseti permitem fivelas na parte externa do pé com base na preferência profissional ou na conveniência do cliente. Não alterará o desempenho ou o risco de lesões orientando as fivelas para fora.

Acabei de receber meu pedido e os AFOs parecem muito grandes/muito pequenos. Existe um tamanho diferente que funcionaria melhor?

Entre em contato com nossa equipe pelo WhatsApp +55 11 99752-4845 ou pelo e-mail asilva@orthopediatrics.com.

O calcanhar da criança não está para baixo na AFO. Algo está errado?

Se o calcanhar não estiver visível na abertura do calcanhar, consulte seu médico para garantir que o pé torto esteja totalmente corrigido. Se o médico indicar que a correção é boa, pode não ser necessário forçar o calcanhar para baixo na AFO, pois isso pode causar irritação da pele, desconforto da órtese e redução da adesão da órtese.

Quanto tempo cada par de AFOs durará?

Em média, uma AFO dura de 4 a 9 meses. Algumas crianças crescem rapidamente e precisarão de novas AFOs dentro de três meses. À medida que a taxa de crescimento da criança diminui, mais tempo pode ser esperado de cada AFO.

Quanto tempo vai durar a barra?

As barras são ajustáveis e devem durar aproximadamente 2-3 pares de AFOs. A largura da barra deve ser verificada e ajustada periodicamente para corresponder à largura dos ombros da criança ou conforme recomendado pelo seu médico ou ortopedista.



+55 11 99752-4845

WhatsApp e telefone

ORTHOPEDIATRICS BRASIL | FOLLOW MED

E-mail: asilva@orthopediatrics.com

Instagram: [@followmed.ortopedia](https://www.instagram.com/followmed.ortopedia)



"Give a girl ***the right pair of shoes***
and she can **conquer the world**"



Set your patients on the road to world domination with the
MITCHELL PONSETI® AFO.
Only from MD Orthopaedics.



Documento nº MD 700 Revisão 1

Fabricante dos produtos Mitchell Ponseti®

+55 11 99752-4845 | asilva@orthopediatrics.com